

Aculife Magnetic Wave Stimulator

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Aculife Magnetic Wave Stimulator jest produktem, który powstał w wyniku połączenia wiedzy związanej z trwającą pięć tysięcy lat chińską tradycją akupunktury oraz nowoczesnej technologii służącej wzmocnieniu odporności. Poprzez stymulowanie punktów akupunktury znajdujących się na dłoniach oraz uszach za pomocą długich fal elektromagnetycznych, urządzenie może poprawić mikro-cyrkulację wewnątrz organizmu, przyspieszając w ten sposób metabolizm oraz zwiększając odporność na szereg powszechnych obecnie dolegliwości. Ponadto, urządzenie daje również efekt łagodnego masażu ciepłem, co umożliwia wyeliminowanie objawów zmęczenia oraz poprawę cyrkulacji krwi.

Atuty sprzedażowe

1. **Lokalizowanie punktów akupunktury:** Instrukcja ta umożliwia szybkie zlokalizowanie położenia punktu/ -ów akupunktury.
2. **Poprawa cyrkulacji krwi:** Fale elektromagnetyczne wykorzystywane do stymulowania punktów akupunktury w celu poprawy cyrkulacji krwi dają takie same efekty, jak stosowanie akupunktury tradycyjnej.
3. **Efekt elektromagnetyczny:** Wykorzystanie fal elektromagnetycznych w celu magnetyzowania znajdujących się w ciele płynów, co zgodnie z TCA zwiększa odporność organizmu.
4. **Ochrona organizmu:** Większa odporność skutecznie wzmacnia organizm.
5. **Łagodzenie dolegliwości:** Kontroluj całkowicie swój organizm. Punkty akupunktury znajdujące się na dłoniach oraz uszach mogą być dotykane w połączeniu.
6. **Łatwość użycia:** Urządzenie może być stosowane przez całą rodzinę, jest łatwe i bezpieczne w użyciu.
7. **Lekkie i przenośne:** Urządzenie możesz zabrać ze sobą wszędzie. Można je stosować w każdym czasie i w każdym miejscu.
8. **Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD:** Wyświetlacz LCD pokazuje częstotliwość fal magnetycznych oraz czas regulowania częstotliwości zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Jak podają dokumenty z czasów starożytnego Cesarstwa Chińskiego, pokolenia lekarzy potwierdziły, iż 6 z 12 meridian znajdujących się w ludzkim ciele połączonych jest z uszami oraz dłońmi.

Udowodniono, iż stymulując meridiany uszu oraz dłoni można ustalić stan zdrowia na podstawie zmian w nasileniu fal elektromagnetycznych. W przypadku istnienia dolegliwości, meridiana będzie miała mniejszą siłę fali elektromagnetycznych. W przypadku, gdy TIENS-ACULIFE wykryje zmiany, osoba odczuje klucie. TIENS-ACULIFE skoryguje zmiany, które organizm może uleczyć samoczynnie.


OPIS *Aculife* Magnetic Wave Stimulator:



1. Patent przyznany w Stanach Zjednoczonych Nr Us 6, 285, 905B1
2. Rejestr Patentów w Japonii Nr 3065692
3. Patent przyznany w Australii Nr 55027/00
4. Patent przyznany w Korei Nr 0184917
5. Patent przyznany w Niemczech Nr 299 11 259,4
6. Patent przyznany na Tajwanie Nr 177857
7. Patent przyznany w Malezji Nr MY-120391
8. Wnioski o przyznanie patentów w innych krajach będą składane sukcesywnie.
9. Numer rejestracji przez amerykańską Federalną Administrację ds. Żywności i Leków FDA K051197

- 1. Wejście próbnika:** W czasie używania urządzenia do wejścia tego powinny być podłączone przewody próbnika oraz wtyczka uziemienia.
- 2. Wejście adaptera:** Do tego wejścia powinna być podłączona wtyczka adaptera.
- 3. Wskaźnik czasu:** Wyświetlacz LCD pokazuje czas stymulacji.
- 4. Wskaźnik poziomu zużycia baterii:** Wyświetlacz LCD pokaże informacje o wyczerpaniu baterii.
- 5. Intensywność stymulacji:** Skala intensywności stymulacji ma 15 stopni.
- 6. Zwiększenie intensywności (+):** W celu zwiększenia intensywności należy delikatnie nacisnąć przycisk.
- 7. Zmniejszenie intensywności (-):** W celu zmniejszenia intensywności należy delikatnie nacisnąć przycisk.
- 8. Przycisk ponownego ustawienia czasu:** Należy przycisnąć przed rozpoczęciem stymulacji, czas odliczany będzie na wyświetlaczu LCD. Przycisk ten służy również do ponownego ustawiania czasu.
- 9. Zasilanie Włączone/Wyłączone:** Żeby włączyć urządzenie naciśnij przycisk raz, aby wyłączyć je, naciśnij przycisk powtórnie
- 10. Ustawienia pamięci dot. intensywności:** Przycisk ten należy przycisnąć przed naciśnięciem M1 lub M2.
- 11. Wstępne ustawienia pamięci (M1/M2):** Po naciśnięciu tego przycisku nastąpi zapisanie w pamięci intensywności stymulacji. M1 jest przyciskiem pierwszej pamięci, a M2 przyciskiem drugiej pamięci.
- 12. Przycisk „Złagodź” / „Wykryj”**

Wyposażenie:

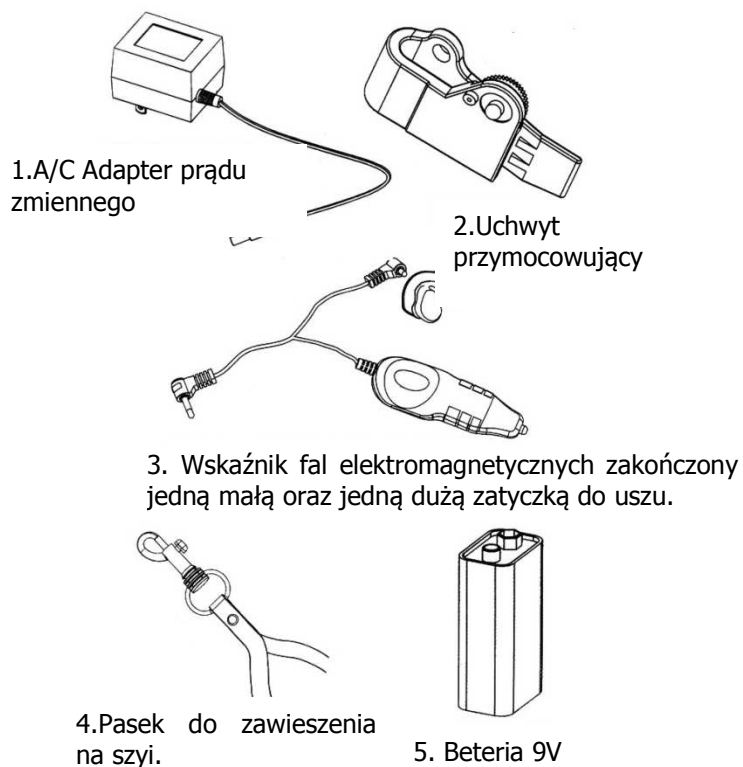

Specyfikacja:

1. Źródło zasilania: prąd stały 9V (urządzenie może być podłączone do konwertera prądu zmiennego na prąd stały)
2. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
3. Zasilanie: Przycisk: Włącz/Wyłącz
4. Materiał, z którego wykonano przycisk: silikon
5. Częstotliwość: 1-60 Hz (regulowana)
6. Natężenie prądu: 2,3-12uA
7. Opór silikonu: 250-300 ohm
8. Zużycie prądu: 60mA
9. Rozmiar: 119,74mm (dł.) x 65mm (szer.) x 31,12mm (wys.)

Instrukcja użytkowania:

- Umieść wskaźnik magnetyczny w konektorze.
- Wybierz właściwą zatyczkę do uszu, a następnie umieść ją w lewym uchu (**uwaga:** zatyczka do uszu w lewym uchu, wskaźnik na lewej dłoni)



- Włącz zasilanie.
- Przed rozpoczęciem wykrywania dolegliwości, należy umieścić wskaźnik pod paznokciem lewego kciuka, aby ustalić właściwy nasilenie.
- Reguluj sygnał po jednym poziomie do momentu wystąpienia odczucia przypominającego ukłucie igły. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wyższy poziom odporności oznacza większą dokładność wykrywania dolegliwości.
- Po ustawieniu właściwego poziomu, należy przesuwając wskaźnik wokół dłoni, zgodnie z diagramem, który warto mieć w pobliżu.
- Jeżeli w określonym punkcie wystąpi kłujący ból (przypominające odczucie, którego osoba doświadczyła wcześniej na kciuku), może to wskazywać na możliwy problem z samopoczuciem. Na diagramie należy sprawdzić, z którym punktem jest to związane.
- Po umieszczeniu wskaźnika na punkcie akupunktury należy przełączyć urządzenie z trybu „Wykryj” na tryb „Złagodź”. Proszę ponownie ustawić zegar i trzymać wskaźnik na punkcie akupunktury. Sesja będzie trwała 5 minut. Na końcu sesji będzie można usłyszeć sygnał.
- Aby szybciej uzyskać efekt złagodzenia dolegliwości, po każdej kolejnej sesji należy zwiększać intensywność sygnału.
- Dla każdego punktu akupunktury zaleca się sesje o maksymalnej długości 15-20 minut. Sesje można przeprowadzać dla wielu punktów akupunktury w ciągu dnia, w zależności od indywidualnych potrzeb. Po zakończeniu każdej sesji należy wypić szklankę ciepłej wody, aby usunąć z organizmu zanieczyszczenia.
- W przypadku szczególnie problematycznych punktów należy zwiększać liczbę sesji do momentu, kiedy mrowiący ból zniknie. Oznaczać to będzie, iż związana z danym punktem dolegliwość została złagodzona.
- Powtarzanie sesji łagodzących spowoduje wzrost odporności naszego organizmu.
- W pamięci (M1 lub M2) można zapisać najbardziej odpowiedni dla danej osoby poziom stymulacji, co umożliwi zastosowanie odpowiedniego sygnału bezpośrednio po wybraniu opcji pamięci. Po zwolnieniu przycisku pamięci i ponownym ustawieniu zegara, urządzenie rozpocznie pięciominutową sesję.
- W przypadku korzystania z urządzenia wewnątrz budynku należy korzystać z adaptera prądu zmiennego. Po zakończeniu sesji trzydziestominutowej, należy urządzenia nie używać przez parę minut.
- W przypadku stosowania urządzenia na zewnątrz, należy używać baterii alkalicznej 9V.
- Kiedy TIENS-ACULIFE nie jest używany, należy go wyłączyć.



Stosowanie urządzenia jest surowo wzbronione w przypadku:

1. Osób z wszczepionym rozrusznikiem serca.
2. Kobiet w ciąży.
3. Dzieci poniżej 3 roku życia.
4. Osób, u których wykryto guza złośliwego.
5. Osób ze skłonnościami do krwotoków.
6. Osób z gruźlicą.
7. Osób uzależnionych od alkoholu

Środki ostrożności:

1. Nie należy stosować TIENS-ACULIFE w przypadku dużego zmęczenia oraz stanu głodu. Należy odpocząć przez 30 minut i zjeść lekki posiłek, a następnie przejść do korzystania z urządzenia.
2. Po posiłku należy odpocząć przez godzinę przed zastosowaniem TIENS-LIFE.
3. Przed zastosowaniem TIENS-ACULIFE należy wysuszyć dłonie. W przypadku niskiej temperatury, przed zastosowaniem TIENS-ACULIFE należy również dłonie ogrzać.
4. Po sesji należy unikać brania zimnych kąpeli oraz picia zimnych napoi. Po każdej sesji zalecany jest jednogodzinny odpoczynek.
5. Po stosowaniu TIENS-ACULIFE przez 15 kolejnych dni, należy je przerwać na okres 3 dni przed rozpoczęciem kolejnych sesji.
6. W przypadku niektórych osób po odbyciu sesji może wystąpić wysypka. Wysypka taka jest zjawiskiem normalnym i powinna ustąpić po około godzinie od czasu zakończenia sesji.
7. Detektor nie powinien dotykać żadnych przedmiotów metalowych, np. zegarków czy pierścionków.
8. Skala stymulacji podczas sesji może różnić się między pacjentami. Im większa jest jednak skala stymulacji, tym lepsze są rezultaty terapii.
9. Intensywność fali elektromagnetycznych określona jest w skali piętnastostopniowej. Zaleca się, aby użytkownicy, którzy dopiero zaczynają korzystać z urządzenia rozpoczęli od pierwszego stopnia, a następnie stopniowo zwiększali natężenie sygnału, w zależności od indywidualnych reakcji organizmu.
10. Po odbyciu sesji zaleca się wypicie 300-500 cm³ ciepłej wody. Bezpośrednio po zakończeniu sesji nie należy pić zimnej wody ani brać zimnego prysznica czy kąpeli.
11. Zalecane jest stosowanie TIENS-ACULIFE regularnie, np. 1 dzień – sesja dla układu pokarmowego, 2 dzień – sesja dla układu krążenia, 3 dzień – sesja dla układu oddechowego, itd.
12. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia po zakończeniu sesji z wykorzystaniem TIENS-LIFE, należy skonsultować się z lekarzem.
13. Jeżeli osoba jest w trakcie jakiegokolwiek leczenia, przed użyciem TIENS-ACULIFE należy skonsultować się z lekarzem.
14. Należy unikać kontaktu wody z TIENS-ACULIFE, ponieważ wilgoć może zakłócić działanie urządzenia.
15. Należy chronić urządzenie przed upadkiem/silnymi wstrząsami.
16. Należy stosować tylko załączony w opakowaniu adapter prądu zmiennego.
17. Ciągłe korzystanie z urządzenia powoduje duże zużycie energii. W przypadku zasilania z baterii, należy stosować baterie alkaiczne.
18. Siła fal elektromagnetycznych opcji „Wykryj” (moc 2) jest większa od siły opcji „Złagodź” (moc 1), co ułatwia określenie samopoczucia użytkownika.
19. Nie należy używać TIENS-ACULIFE umieszczając zateczkę do uszu w lewym uchu przy jednoczesnym umieszczeniu wskaźnika na prawej dłoni, ani umieszczać zateczki do uszu w prawym uchu przy jednoczesnym umieszczeniu wskaźnika na lewej dłoni.
20. Nie należy stosować TIENS-ACULIFE w okolicy serca, głowy oraz twarzy.